

# Arbeitsstützgürtel mit extra Zugbändern und Hosenträgern, inkl. 4 Werkzeugschlaufen

## 1 | Lieferumfang

1 x Arbeitsstützgürtel inkl. 4 Werkzeugschlaufen

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig und sorgfältig durch!

## 2 | Zweckbestimmung:

Durch äußeren Druck (Kompression) soll die Bauch- und Rückenmuskulatur aktiviert und unterstützt werden. Eine Stabilisierung und Entlastung der Lendenwirbelsäule und der umliegenden Muskulatur kann entkrampfend und damit schmerzlindernd wirken. Die zusätzlichen Gurte verstärken die stabilisierende Wirkung der Bandage.

- Stützt die Wirbelsäule und fördert eine aufrechte Körperhaltung.
- Bandscheibenbeschwerden
  - Hexenschuss
  - Ischiasschmerzen
  - Überlastungsschmerz

## Zum privaten Gebrauch

## 3 | Kontraindikationen / Nicht geeignet

Bei folgenden Krankheitsbildern ist das Tragen des Artikels nur nach Rücksprache mit ihrem Arzt zu empfehlen:

- Hauterkrankungen/-verletzungen im betroffenen Körperabschnitt, besonders bei entzündlichen Erscheinungen wie Schwellungen, Rötung und Überwärmung
- Allergische Reaktionen auf das Material
- Empfindungs- und Bewegungsstörungen, z.B. bei Zuckerkrankheit
- offene Wunden oder innere Verletzungen
- für Kleinkinder oder Personen, die sich nicht bemerkbar machen können, wenn das Produkt unangenehm sitzt
- Lymphabflussstörungen oder unklare Weichteilschwellungen auch außerhalb des Anwendungsbereichs

## 4 | Hinweise zur sicheren Anwendung des Produkts

Nebenwirkungen, die den gesamten Organismus betreffen, sind bisher nicht bekannt. Eine sachgemäße Anwendung wird vorausgesetzt. Bei unsachgemäßer Anwendung ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

- Sollte die Bandage zu eng sitzen oder als unangenehm empfunden werden, nehmen sie sie sofort ab!
- Bandage nur stundenweise, nicht dauerhaft tragen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder Sie ungewöhnliche Veränderungen feststellen, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.

**Nicht verwenden:** während des Schlafens

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen **schwerwiegenden** Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

## Für Deutschland:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Medizinprodukte  
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn <https://www2.bfarm.de/medprod/mpsv/>

## 5 | Anwendung

**Anlegen des Rückenstützgürtels: Abb. 1+2:** Zunächst die Klettverschlüsse der beiden extra Zuggurte von der Bandage lösen. Den Stützgürtel mit dem Klettverschluss (innen) in der rechten Hand halten und um den Rücken führen. Die beiden Bänder seitlich vom Körper weg ziehen. Den Klettverschluss vorne an beliebiger Stelle auf der Bandage verschließen.

**Abb. 3:** Zum Befestigen der zwei extra Zugbänder genauso verfahren. **Abb. 4+5:** Nach Anlegen des Stützgürtels die beiden Hosenträger von hinten über Kreuz nach vorne führen und mit dem Klett auf der Bandage befestigen.

**Abb. 6:** Die Werkzeugschlaufen können mit zwei Klettverschlüssen beliebig an dem Stützgürtel befestigt

## 6 | Reinigung

Die Reinigung erfolgt durch handelsübliche Wäsche, gemäß Pflegeanleitung. Beim Waschen Klettverschlüsse verschließen, um Beschädigungen an anderen Wäschestücken zu vermeiden.







## Adresse für Garantie und Service:

Hydas GmbH & Co. KG  
c/o atrikom fulfillment GmbH

Haagweg 12, 65462 Ginsheim-Gustavsburg



Material: 89 % Polyester | 11 % Elasthan

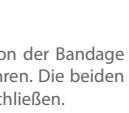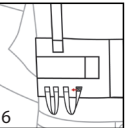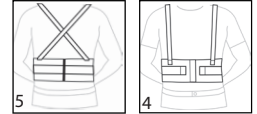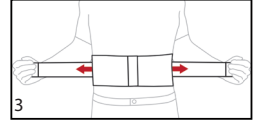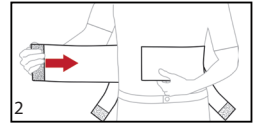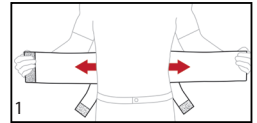

## 4 | Tuotteen turvallista käyttöä koskevat huomautukset

Koko organismiin vaikuttavia haittavaikutuksia ei vielä tunneta. Asianmukainen käyttö on tarpeen. Virheellisen käytön tapauksessa tuotevastuu ei tule kyseeseen.

- Jos tukivävyön on liian tiukka tai epämiellyttävä, irrota se heti!
- Tukihihnaa vain tunti, älä käytä pysyvästi!
- Jos oireesi pahenevat tai huomaat tilassasi jotain poikkeavaa, ota viipymättä yhteyttä lääkäriin.

**Älä käytä:** nukkuessa

## 5 | Sovellus

Kiinnitä ripustetun selkänöjahihnan: Kuva 1: Irrota ensin turvavyön kahdesta hihnasta koukku- ja silmukkakiinnikkeet. Pidä turvavyötä oikealla kädellä olevaan tarranauhakiinnikkeeseen (sisäpuolella) ja pakkaa se selän puolelle. Vedä ensin kaksi hihnaa pois kehosta. Kuva 2: Sulje sitten koukku ja silmukka eteenpäin milloin tahansa hihnalla. Kuva 3: Voit liittää kaksi ylimääräistä merkijonoa siirtymällä samalla tavalla. Kuva 4+5: Kun olet tarkastellut turvavyötä, ylitä saranat selkänöjojan ja kiinnitä ne hihnan etuosaan. Kuva 6: Työkälsilmukat on kiinnitetty tukivävyöhön kahdella koukulla ja silmuilla.

## 6 | Pesu

Siivous tapahtuu siivousohjeen mukaisesti. Sulje koukku- ja silmukkakiinnikkeet pesun aikana, jotta muut pyyhkeet eivät vaurioidu.

## CZ | Opěrný pás - práce, včetně 4 nástrojových smyček

### 1 | Dodávky

1 x Opěrný pás - práce, včetně 4 nástrojových smyček

Přečtěte si návod k použití zcela a pečlivě!

### 2 | Určeným účelem

Vnější tlakem (kompresi) by měly být aktivovány a podporovány břišní a zádové svaly. Stabilizace a úleva bederní páteře a okolního svalstva mohou mít relaxační účinek, a tedy i úlevu od bolesti.

Podporuje páteř a podporuje vzpřímenou pozici.

- Problémy s diskem
- Ischiás
- Lumbago
- Bolest přetížení

### Pro soukromé použití

### 3 | Kontraindikace / Nevhodné

V případě následujících onemocnění se doporučuje nosit tento článek pouze po konzultaci se svým lékařem:

- Kožní onemocnění/poranění v postižené části těla, zejména u zánětlivých příznaků, jako je otok, zarudnutí a přehřátí
- Alergické reakce na materiál
- Senzorické a pohybové poruchy, např.
- Otevřené rány nebo vnitřní zranění

- Lymfatické odtokové poruchy nebo nejasný otok měkkých tkání i mimo rozsah použití. Pro batolata nebo osoby, které se nemohou cítit, pokud výrobek sedí nepříjemně

### 4 | Poznámky k bezpečnému používání výrobku

Nežádoucí účinky postihující celý organismus nejsou dosud známy. Je vyžadována správná aplikace. V případě nesprávného použití je odpovědnost za výrobek vyloučena.

- Pokud je opěrný řemen příliš těsný nebo nepohodlný, okamžitě jej vyjměte!

- Opěrné řemeny jen za hodinu, neotvírejte se trvale!

- Zhorší-li se Vaše obtíže nebo pokud na sobě zpozorujete neobvyklé změny, vyhledejte prosím obratem svého lékaře.

**Nepoužívejte:** Během spánku

### 5 | Aplikace

Použijte Obrysový zádový opěrný: Obr. 1: Nejprve uvolněte suché zipy dvou extra těžných popruhů z obvazu. Držte opěrný pás pomocí suchého zipu (vnitřní) v pravé ruce a vedte jej kolem zad. Nejprve vytáhněte ty dva pásy směrem od těla. Obr. 2: Poté vpředu zapněte suchý zip na jakémkoli místě na obvazu. Obr. 3: Chcete-li připojit dva další stahovací pásy, postupujte stejným způsobem. Obr. 4+5: Přiložte šle zezadu přes záda vřed a upevněte suchý zip na bandáž. Obr. 6: Připojte nástrojové smyčky na suchý zip k opěrnému pásu.

### 6 | Čištění

Čištění se provádí perlivým prádlem podle pokynů pro péči.

Během praní uzavřete háčky a smyčky, aby nedošlo k poškození dalších kusů prádla.

## N | Støttele - Arbeid, inkl. 4 verktøysløyfer

### 1 | Levering

1 x Støttele - Arbeid, inkl. 4 verktøysløyfer

Les bruksanvisningen helt og forsiktig!

### 2 | Formål

Ved eksternt trykk (kompresjon) bør buk- og ryggmuskulaturen aktiveres og støttes. En stabilisering og lindring av lumbale ryggraden og den omkringliggende muskulaturen kan ha en avslappende effekt og dermed smertelindrende effekt.

Støtter ryggraden og fremmer en oppreist holdning.

- Diskproblemer
- isjias
- Lumbago
- Smertes etter overbelastning

### For privat bruk

### 3 | Kontraindikasjoner / Ikke egnet

I tilfelle av følgende medisinske tilstander anbefales det å bruke denne artikkelen først etter samråd med legen din:

- Hudsykdommer/-skader i den berørte delen av kroppen, spesielt ved inflammatoriske tilstander som hevelse, rødhet og overoppheting
- Allergiske reaksjoner på materialet
- Sensoriske og bevegelsesforstyrrelser, f.eks.
- åpne sår og interne skader
- Lymfatiske avrenningsforstyrrelser eller uklar hevelse i bløtvev selv utenfor bruksområdet

- For småbarn eller personer som ikke kan få seg til å føle seg hvis produktet sitter ubehagelig

### 4 | Merknader om sikker bruk av produktet

Bivirkninger som påvirker hele organismen er ennå ikke kjent. Riktig bruk er nødvendig. Ved feil bruk er produktansvaret utelukket.

- Hvis bandasje er for stram eller ubehagelig, ta den ut umiddelbart!
- Støt båndene bare i timen, ikke bruk permanent!
- Hvis symptomene forverres eller du merker uvanlige endringer, må du kontakte legen din umiddelbart.

**Må ikke brukes:** Mens du sover

### 5 | Programmet

**Påfør støttele:** Avb. 1: Først løser krok og løkkfester på de to ekstra stroppe fra setebeltet. Hold sikkerhetsbelte med kardborrbandet (innsiden) i høyre hånd og pakk det rundt ryggen. Trekk først de to stroppe vekk fra kroppen. Avb. 2: Deretter lukker kroken og sløyfen på fronten når som helst på beltet. Avb. 3: For å feste de to ekstra strengene, flytt på samme måte. Avb. 4+5: Kryss hengslene i bakstykket og fest dem til forsidene av beltet. Avb.6: Verktøysløyfene er festet til støttelebeltet med to kroker og løkker.

### 6 | Rengjøring

Rengjøring utføres av husholdningsvask, i henhold til pleieanvisninger. Lukk festene på kroken og sløyfene under vaskingen for å unngå skade på andre tøy.

## FIN | Tukihihna - työ, sis. 4 lenkit työkaluille

### 1 | Toimitus

1 x Tukihihna - työ, sis. 4 lenkit työkaluille

Lue käyttöohjeet huolellisesti ja huolellisesti!

### 2 | Käyttötarkoituksella

Ulkopuolisessa paineessa (puristus) tulee vatsa- ja selkähäksia aktivoida ja tukea. Lannerangan ja ympäröivän lihaksiston stabilointi ja helpotus voivat olla rentouttava vaikutus ja siten kipua lievittävä vaikutus.

Tuuke selkärannaa ja estää pystyssä asennetta.

- levyngelmat
- iskias
- lombago
- Ylikuormituksen kipu

### Yksityiskäyttöön

### 3 | Vasta - Aiheet / Ei sovellu

Seuraavissa sairauksissa on suositeltavaa käyttää tätä artikkelia vasta lääkärin kuulemisen jälkeen:

- Ihosairaudet/vammat hoidettavassa kehon osassa, erityisesti tulehduksoreissa, kuten turvotukseen, punoituuun ja ylikuumenemiseen
- Allergiset reaktiot materiaalle
- Aisti- ja liikehäiriöt, esim.
- Avoimet haavat tai sisäiset vammat
- Lymfaattiset valuma-alueet tai epäselviä pehmytkudoksen turvotusta myös
- Taaperot tai henkilöt, jotka eivät saa itseään tuntemaan, jos tuote istuu epämiellyttävän

## GB | Support Belt - Work, incl. 4 tool loops

### 1 | Delivery

1 x Support Belt - Work, incl. 4 tool loops

Read the instructions for use completely and carefully!



### 2 | Intended purpose

By external pressure (compression), the abdominal and back muscles should be activated and supported. A stabilization and relief of the lumbar spine and the surrounding musculature can have a relaxing effect and therefore a pain-relieving effect.

Supports the spine and promotes an upright posture.

- Disc problems
- Sciatica
- Lumbago
- Pain from overstrain

For private use

### 3 | Contraindications / Not suitable

In the case of the following medical conditions, it is only recommended to wear this article after consultation with your doctor:

- Skin problems/injuries to the part of the body where the support is worn, especially if there are signs of inflammation, swelling, redness and over-heating
- allergic reactions to the material
- Sensation/movement disorders e.g., associated with diabetes
- open wounds and internal injuries
- allergic reactions to the material
- Lymphatic runoff disorders or unclear soft tissue swelling even outside the scope of application.
- For small children or persons who can not be noticeable when the product sits uncomfortably

### 4 | Notes on safe use of the product

Side effects affecting the whole organism are not yet known. Proper application is required. In case of improper use, product liability is excluded.

- If the bandage is uncomfortable, remove it immediately!
- Wear bandage only by the hour, do not wear permanently!
- If your symptoms worsen or you notice any unusual changes, please contact your doctor immediately.

**Do not use:** while sleeping

### 5 | Application

**Applying support belt:** Fig. 1: First loosen the hook and loop fasteners of the two extra pull straps from the support belt. Hold the support belt with the hook and loop closure (inside) in the right hand and guide it around the back. Pull the two straps sideways away from the body. Fig. 2: Then close the hook and loop fastener at the front at any point on the bandage. Fig. 3: To attach the two extra strings proceed the same way. Fig. 4+5: Cross the two suspenders at the back and attach to the front of the support belt. Fig. 6: Attach the tool loops to the support belt with hook and loop closures

### 6 | Cleaning

Cleaning is done by household laundry, according to care instructions. Close hook and loop fasteners during washing to avoid damaging other items of laundry.

## F | Ceinture de soutien - Travail, avec 4 porte outils

### 1 | Livraison

1 x Ceinture de soutien - Travail, avec 4 porte outils

Lire les instructions pour une utilisation complète et soigneusement!



### 2 | Destination

Par pression externe (compression), les abdominaux et les muscles du dos doivent être activés et soutenus. Une stabilisation et un soulagement de la colonne vertébrale lombaire et de la musculature environnante peuvent avoir un effet relaxant et donc un effet analgésique.

Soutient la colonne vertébrale et favorise une posture droite.

- Problèmes de disque
- Sciaticques
- Lumbago
- Douleur de surcharge

Pour usage privé

### 3 | Contre-indications / Non adaptés

Dans le cas des conditions médicales suivantes, il est recommandé de ne porter cet article qu'après consultation avec votre médecin:

- Maladies de la peau et blessures sur le pied, en particulier en cas de symptômes inflammatoires tels que le gonflement, la rougeur et la chaleur.
- Réactions allergiques au matériau
- Les troubles sensoriels et de mouvement, par exemple dans le cas du diabète
- Blessures ouvertes ou internes
- Les troubles lymphatiques du ruissellement ou l'enflure peu claire des tissus mous, même en dehors du champ d'application
- Pour les tout-petits ou les personnes qui ne peuvent pas se faire sentir si le produit est assis mal à l'aise

## 4 | Notes sur l'utilisation sûre du produit

Les effets secondaires affectant l'organisme entier ne sont pas encore connus. Une application appropriée est nécessaire. En cas d'utilisation inappropriée, la responsabilité du produit est exclue.

• Si le bandage est trop serré ou inconfortable, retirez-la immédiatement!

• Soutenez le bandage seulement à l'heure, ne les portez pas en permanence!

• Si vos symptômes s'aggravent ou si vous remarquez des changements inhabituels, consultez immédiatement votre médecin.

**N'utilisez pas:** Pendant le sommeil

### 5 | Application

**Appliquez la ceinture de soutien:** Fig. 1: Desserrez d'abord les fermetures à boucles et à crochets des deux sangles supplémentaires de la ceinture de soutien. Tenez la ceinture de maintien avec le crochet et la boucle (intérieure) dans la main droite et guidez-la vers l'arrière. Tirez les deux sangles latéralement loin du corps. Fig. 2: Ensuite, fermez le crochet et la boucle à l'avant à tout point du bandage. Fig. 3: Pour attacher les deux cordons supplémentaires, procédez de la même manière. Fig. 4+5: Traversez les bretelles dans la zone arrière et attachez-les à l'avant du bandage. Fig. 6: Les portes outils sont attachées à la ceinture de support avec deux sangles de fermeture à boucles et crochets.

### 6 | Nettoyage

Le nettoyage se fait par blanchisserie, selon les instructions de soins. Fermer les attaches auto-agrippantes pendant le lavage pour éviter d'endommager d'autres articles de linge.

## NL | Steungordel voor bij het werk, incl. 4 gereedschapslussen

### 1 | Levering

1 x Steungordel voor bij het werk, incl. 4 gereedschapslussen

Lees de gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig!



### 2 | Beoogd doeleind

Door externe druk (compressie) moeten de buik- en rugspieren worden geactiveerd en ondersteund. Een stabilisatie en verlichting van de lumbale wervelkolom en de omliggende spieren kan een ontspannend effect hebben en daarom een pijnstillend effect hebben.

Ondersteunt de wervelkolom en bevordert een rechtopstaande houding.

- Schijfproblemen
- Ischias
- Lumbago
- Overbelast pijn

Voor privégebruik

### 3 | Contra-indicaties / Niet geschikt

In het geval van de volgende medische aandoeningen wordt het aanbevolen om dit artikel alleen te dragen na overleg met uw arts:

- Huidziekten/kwetsuren in het getroffen lichaamsdeel, in het bijzonder bij ontstekingsverschijnselen zoals zwellingen, roodheid en oververhitting
- Allergische reacties op het materiaal
- Sensorische en bewegingsstoornissen, bijvoorbeeld bij diabetes
- Open wonden of inwendige verwondingen
- Lymfeafloopstoornissen of onduidelijke zwelling van het zachte weefsel, zelfs buiten het toepassingsgebied
- Voor peuters of mensen die zich niet kunnen laten voelen als het product onaangenaam zit

### 4 | Opmerkingen over veilig gebruik van het product

Bijwerkingen die het hele organisme beïnvloeden zijn nog niet bekend. Een goede toepassing is vereist. In geval van oneigenlijk gebruik is productaansprakelijkheid uitgesloten.

• Als de bandage te strak of ongemakkelijk is, moet u deze onmiddellijk verwijderen!

• Ondersteun de bandage alleen per uur, draag niet permanent!

• Als uw symptomen verergeren of ongebruikelijke veranderingen

opmerken, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

**Gebruik niet:** tijdens het slapen

### 5 | Toepassing

**De steunriem aanbrengen:** Avb. 1: Maak eerst de haak- en lusbevestigingen van de twee extra trekriemen los van de steunriem. Houd de steunriem vast met de klittenbandsluiting (binnenkant) in de rechterhand en leid hem langs de achterkant. Trek de twee banden zijdelings weg van het lichaam. Avb. 2: Sluit de haak-en-lussluiting aan de voorkant op elk punt op de steunriem. Avb. 3: Bevestig de twee extra trekkoorden op dezelfde manier. Avb. 4+5: Kruiwt u de bretels achteraan en bevestig u deze aan de voorkant van het steunriem. Avb. 6: De gereedschapslussen zijn met twee klittenbanden aan de steunriem bevestigd.

### 6 | Reiniging

Schoonmaken gebeurt door huishoudelijke was, volgens de zorginstructies. Sluit klittenband tijdens het wassen om beschadiging van ander wasgoed te voorkomen.

## I | Cintura di sostegno - Lavoro, con 4 occhielli porta utensili

### 1 | Consegn

1 x Cintura di sostegno - Lavoro, con 4 occhielli porta utensili

Leggi le istruzioni per l'uso in modo completo e attento!



### 2 | Destinazione d'uso

Con la pressione esterna (compressione), i muscoli addominali e dorsali dovrebbero essere attivati e supportati. Una stabilizzazione e un sollievo della colonna lombare e della muscolatura circostante possono avere un effetto rilassante e quindi un effetto antidolorifico.

Supporta la colonna vertebrale e promuove una postura eretta.

- Problemi dei dischi
- Sciatica
- Lombalgia
- Dolore da sovraccarico

Per uso privato

### 3 | Controindicazioni / Non adatto

Nel caso delle seguenti condizioni mediche, si raccomanda di indossare questo articolo solo dopo la consultazione con il medico:

- Malattie/lesioni cutanee nella parte interessata del corpo, in particolare nei sintomi infiammatori come gonfiore, arrossamento e surriscaldamento
- Reazioni allergiche al materiale
- disturbi motori e della sensibilità, per esempio, in caso di diabete
- ferite aperte e lesioni interne
- Disturbi del deflusso linfatico o gonfiore non chiaro dei tessuti molli anche al di fuori dell'ambito di applicazione
- Per i più piccoli o per le persone che non possono farsi sentire se il prodotto è seduto a disagio

### 4 | Istruzioni per l'uso sicuro del prodotto

Effetti collaterali che interessano l'intero organismo non sono ancora noti. È necessaria una corretta applicazione. In caso di uso improprio, la responsabilità del prodotto è esclusa.

• Se la benda è troppo stretta o scomoda, rimuoverla immediatamente!

• Supportare le cinture solo all'ora, non indossare in modo permanente!

• Se i sintomi peggiorano o si notano cambiamenti insoliti, consultare immediatamente il medico.

**Non utilizzare:** Durante il sonno

### 5 | Applicazione

**Applicare la fasciatura di sostegno:** Fig. 1: Allentare prima i fermagli a strappo e gancio delle due cinghie extra di trazione dalla cintura di supporto. Tenere la cintura di supporto con il gancio e la chiusura ad anello (all'interno) nella mano destra e guidarlo intorno alla parte posteriore. Per prima cosa, tirare le due cinghie lateralmente dal corpo. Fig. 2: Quindi chiudere il gancio e la chiusura ad anello sul davanti in qualsiasi punto della cintura. Fig. 3: Per attaccare i due cordoni in più si muovono allo stesso modo. Fig. 4+5: Incrociare le bretelle nella zona posteriore e fissarle sulla parte anteriore della benda. Fig. 6: I passanti degli utensili sono fissati alla cintura di supporto con due cinturini di chiusura a strappo.

### 6 | Pulizia

La pulizia è fatta da lavanderia domestica, secondo le istruzioni di cura.

Chiudere le fissaggio gancio e loop durante il lavaggio per evitare di danneggiare altri capi di bucato.

## E | Cinturón de soporte para el trabajo que incluye 4 portaherramientas

### 1 | Entrega

1 x cinturón de soporte para el trabajo que incl. 4 portaherramientas

Lea las instrucciones de uso completa y cuidadosamente!



### 2 | Finalidad prevista

A través de la compresión, los abdominales y los musculos de la espalda se activan y apoyan. Una estabilización y alivio de la columna lumbar y la musculatura circundante puede tener un efecto relajante y, por lo tanto, un efecto analgésico.

Admite la columna vertebral y promueve una postura erguida.

- Problemas de disco intervertebral
- Ciática
- Lumbago
- Dolor por sobrecarga

Para uso privado

### 3 | Contraindicaciones / No adecuado

En el caso de las siguientes condiciones médicas, se recomienda usar este artículo sólo después de consultar con su médico:

- Enfermedades o lesiones de la piel en la zona afectada, especialmente si hay signos de infección, edema, enrojecimiento y calentamiento.
- Reacciones alérgicas al material
- Trastornos de la sensibilidad y del movimiento, como p.ej., diabetes mellitus.
- heridas abiertas ó lesiones internas
- Trastornos de escorrentía linfática o hinchazón de los tejidos blandos poco clara incluso fuera del ámbito de aplicación

• Para niños pequeños o personas que no pueden sentirse si el producto está sentado incómodamente

### 4 | Instrucciones para el uso seguro del producto

Todavía no se conocen los efectos secundarios que afectan a todo el organismo. Se requiere una aplicación adecuada. En caso de uso indebido, se excluye la responsabilidad del producto.

• Si el vendaje está demasiado apretado o incómoda, ¡retírela inmediatamente!

• ¡Apoye el vendaje solo por horas, no las use permanentemente!

• Si sus síntomas empeoran o observa cambios inusuales, consulte a su médico inmediatamente.

**No usar:** mientras duerme

### 5 | Aplicación

**Aplicar la correa de soporte:** Fig. 1: Afloje los cierres de gancho y bucle de las dos tiras de tracción extra del cinturón de apoyo. Sostenga lo con el cierre de gancho y bucle (interior) en la mano derecha y guíelo por detrás de su espalda. Estire de las dos correas alejandolas de su cuerpo. Fig. 2: Despúes fije el cierre de gancho y bucle delante en cualquier punto del cinturón. Fig. 3: Para colocar los dos cordones adicionales, proceda de la misma manera. Fig. 4+5: Cruzar los tirantes en la zona de la espalda y adjuntarlas a la parte delantera del cinturón. Fig. 6: Los lazos de herramientas están unidos al cinturón de soporte con dos cintas de cierre de gancho y bucle.

### 6 | Limpieza

La limpieza se realiza mediante la lavandería del hogar, de acuerdo con las instrucciones de cuidado. Cierre los sujetadores de gancho y bucle durante el lavado para evitar dañar otras prendas de ropa.

## S | Stödbälte - Arbete, inkl. 4 verktygslingor

### 1 | Leverans

1 x Stödbälte - Arbete, inkl. 4 verktygslingor

Läs bruksanvisningen helt och noggrant!



### 2 | Avsett ändamål

Genom kompression ska buk- och ryggmusklerna aktiveras och stödjäs. En stabilisering och lindring av ländryggen och den omgivande muskulaturen kan ha en avslappande effekt och därmed en smärtlindrande effekt. Stödjer ryggraden och främjar upprätt hållning.

- Skivproblem
- Ischias
- Lumbago
- Smärta efter överbelastning

För privat bruk

### 3 | Kontraindikationer / Inte lämplig

Vid följande medicinska tillstånd rekommenderas att bära denna artikel först efter samråd med din läkare:

- Hudsjukdomar/hudskador i den drabbade delen av kroppen, särskilt vid inflammatoriska symtom som svullnad, rodnad och överhettning
- Allergiska reaktioner mot materialet
- Sensoriska störningar och rörelsestörningar, t.ex.
- Öppna sår eller inre skador
- Lymfatiska avrinningsrubbingar eller oklar mjukdelssvullnad även utanför tillämpningsområdet
- För småbarn eller personer som inte kan göra sig gällande om produkten sitter obehagligt

### 4 | Anmärkningar om säker användning av produkten

Biverkningar som påverkar hela organismen är ännu inte kända. Korrekt tillämpning krävs. Vid felaktig användning är produktansvar uteslutet.

- Om stödbältet är för hårt eller obehagligt, ta bort det omedelbart!
- Stöd bara bälten per timme, bära inte permanent!
- Om dina besvär tilltar eller om du upptäcker ovanliga förändringar ska du omedelbart uppsöka din läkare.

**Använd inte:** medan du sover

### 5 | Program

**Applícera stödbälte:** Avb. 1: Lossa först de krok- och slingfästarna på de två extra dragremarna från stödbältet. Håll stödbältet med kardborrebandet (inuti) i höger hand och väg det runt ryggen. Dra först de två banden i sidled bort från kroppen. Avb. 2: Stäng sedan kroken och slingan på framsidan när som helst på bältet. Avb. 3: För att fästa de två extra snören flytta på samma sätt. Avb. 4+5: Korså hängarna i bakstycket och fäst dem på bandets framsida. Avb. 6: Verktygsslingorna är fästa på stödbältet med två krok och slingor.

### 6 | Rengöring

Städning sker av hushållstvätten, enligt skötselanvisningarna. Stäng krok- och slingfästena under tvätt för att undvika att skada andra tvättföremål.